


# VIRAPID MONO M&G

**Jamais la sérologie EBV n'a été aussi simple !!!**

Déposer 40 µL d'échantillon dans chaque puits

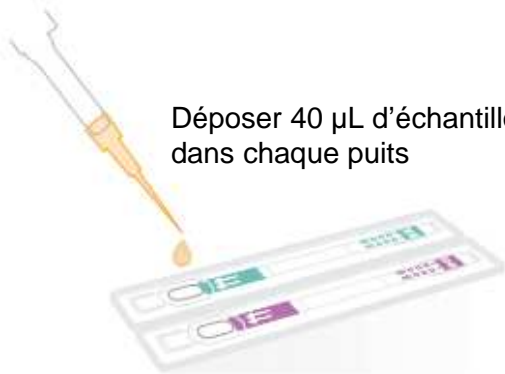

Ajouter 2 gouttes de solution révélatrice



Lecture du résultat



**Kit de 25 tests associant la recherche des IgG et IgM**

**Manipulation : 1 min**

**Résultats : entre 10 et 20 min**

**Conservation : température ambiante**

## Recherche de 4 marqueurs simultanément



**Anticorps hétérophiles**

**Anticorps VCA IgM**

**Anticorps VCA IgG**

**Anticorps EBNA IgG**

Réponse immunitaire typique d'une infection EBV

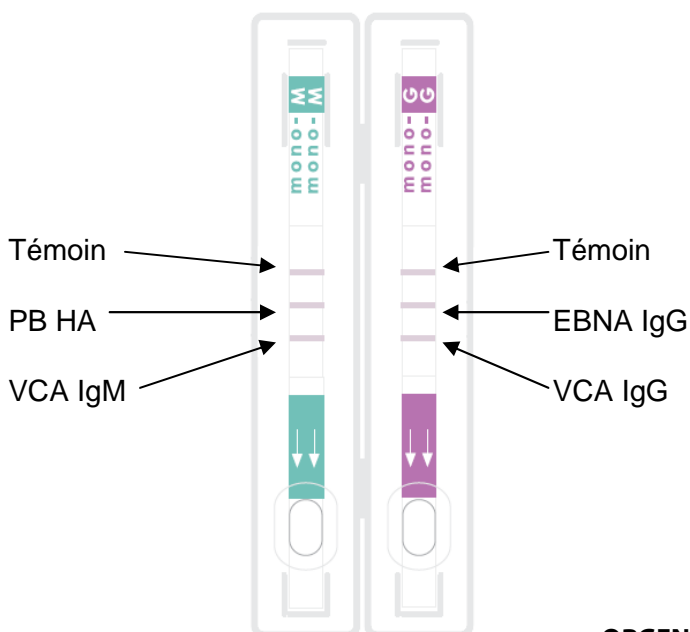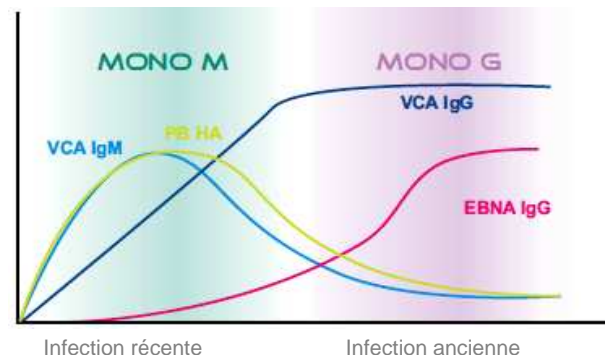

## Lecture simplifiée

**1 témoin par isotype**  
**Gradient d'intensité de positivité**

**ORGENTEC SAS**

Parc d'activité de Pissaloup, 4 rue Edouard Branly

Bâtiment Hermès II, 78190 TRAPPES

Tél: 0130688000 - Fax: 0130688002 - www.orgentec.fr